


AGITADOR VORTEX MIXER – MOD. SCI-FS– SCIOGEX

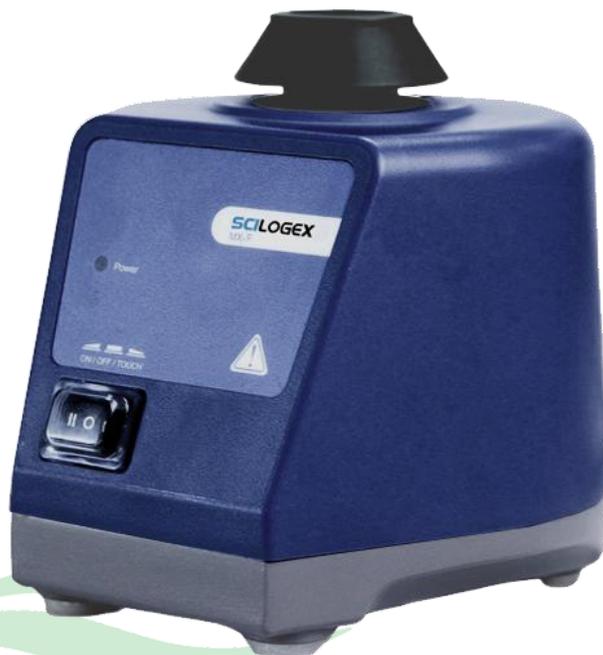

El SCI-FS es un mezclador de vórtice velocidad fija con agitación vórtex a 2500 rpm. Cuenta con control electrónico de velocidad para garantizar que la misma velocidad se mantenga en todo momento, incluso durante los cambios de carga, ofrece además un funcionamiento continuo o táctil. El diámetro orbital es de 4 mm, proporcionando una agitación con vórtex eficaz y eficiente en el interior de la muestra.

Características

- Diseño compacto estable
- Funcionamiento continuo o táctil.
- Control electrónico de velocidad para la velocidad constante, incluso durante los cambios en la carga. Base de acero, pies de silicona para estabilidad de ultra amortiguación de vibraciones

Especificaciones

- Velocidad fija: 2500 rpm
- Movimiento: Orbital
- Diámetro orbital: 4 mm
- Tipo de motor: Motor de polo sombreado
- Condiciones ambientales: 5 - 40°C, 80% HR
- Tipo de protección: IP21
- Consumo de energía: 60W
- Tipo de motor: Cojinetes sin aceite excéntricas
- Dimensiones: 127 x 160 x 130 mm
- Dimensiones empaque: 250 x 230 x 200 mm
- Peso bruto: 3,5 Kg
- Voltaje: 220V, 50Hz/60Hz