

**AUTOCLAVE HORIZONTAL – MOD. ELITE 21 LTS. – BIOART**  
COMPACTO POR FUERA Y GRANDE POR DENTRO



De fabricación y desarrollo en Brasil, la autoclave modelo Elite posee un proyecto moderno que evita los habituales problemas de asistencia técnica. Tiene una construcción robusta, materiales y componentes que ofrecen seguridad, además de indicadores de mantenimiento preventivo garantizando una mayor durabilidad. La autoclave además ofrece un excelente aprovechamiento del espacio interno, sin ocupar un amplio espacio en su consulta.



*Pantalla LCD iluminada*

Con un diseño totalmente innovador, la Autoclave Elite es moderno, fácil de usar y compacto. Fabricado con los mejores componentes del mercado, tanque de acero inoxidable y gabinete con polímeros de ingeniería (ligeros), lo que reduce la incidencia de oxidación. 15 sistemas de seguridad que garantizan calidad y durabilidad.


## Seguridad

- Puerta y tanque en acero inoxidable.
- Aislamiento térmico evitando la disipación de calor.
- Advertencias de mantenimiento preventivo.

## Estructura en monobloque

Su construcción basada en una estructura en monobloque y con componentes de alta calidad, le aseguran una mayor durabilidad del producto. Su diseño está enfocado en disminuir las incidencias de oxidaciones que puedan ocurrir en su vida útil.


Su estructura externa construida en acero inoxidable, sin soldadura y con polímeros de ingeniería proporcionan un mejor acabado y fácil higienización.

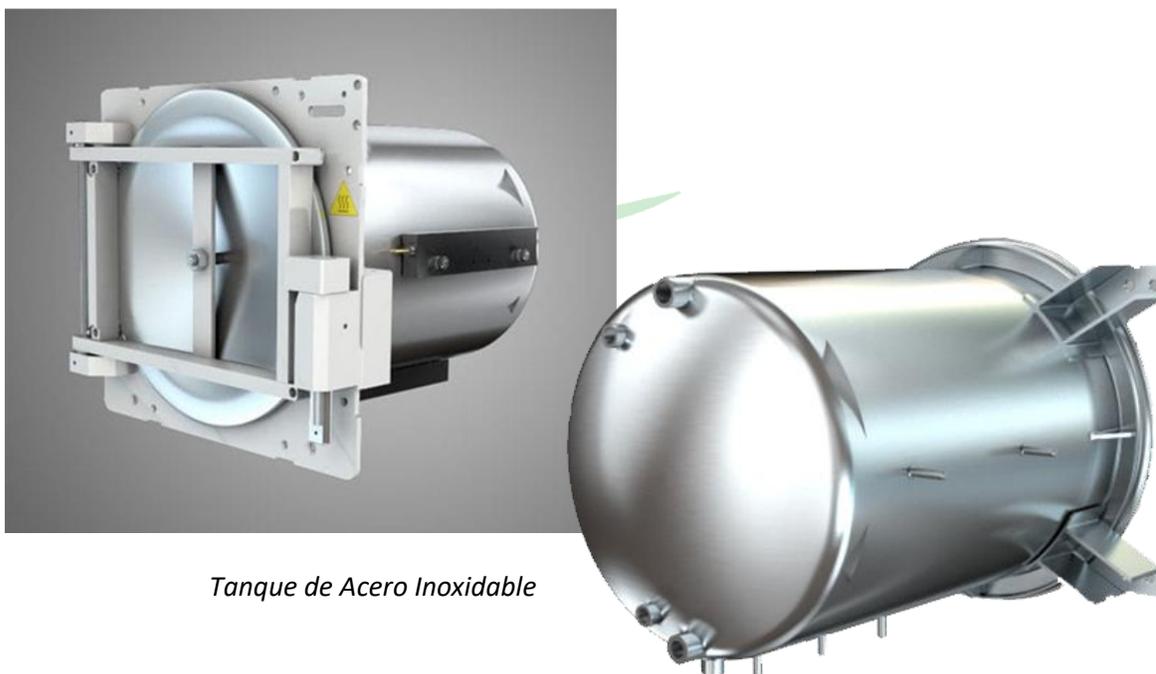

*Tanque de Acero Inoxidable*

## Especificaciones técnicas

	17L	21L
Secado	Puerta cerrada	Puerta cerrada
Clase Autoclave	N	
Esterilización	121°C / 1,15 Bar y 134°C / 2,15 Bar	
Dimensiones del Tanque	24,8cm diam. / 36,2cm profundidad	24,8cm diam. / 41,8cm profundidad
Dimensiones Externas	35,3 x 36,8 x 51,8 cm (L x A x P)	35,3 x 36,8 x 57,1 cm (L x A x P)
Display	Digital - LCD Iluminado	
Alistamiento Térmico	Manta de fibra cerámica con eficiencia hasta 1200°C	
Seguridad	Sistemas mecánicos y digitales	
Bandejas Incluidas	2	
Potencia	1400W	

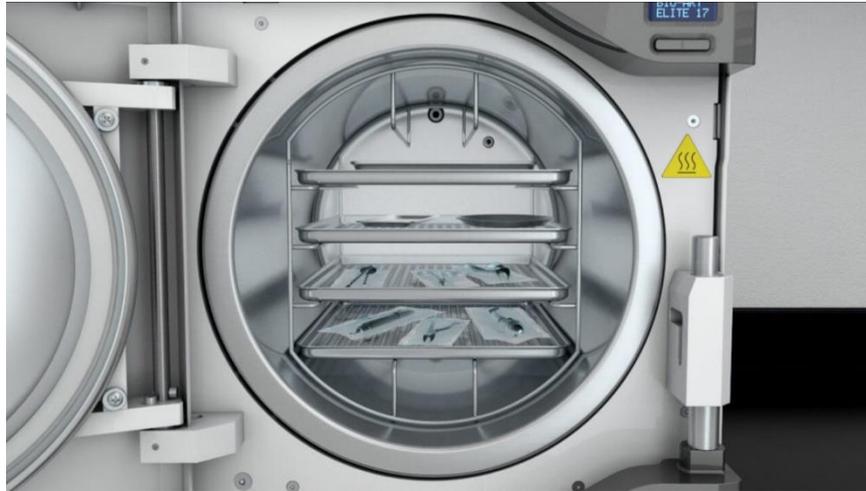

Sostiene hasta 4 bandejas con soporte vertical (17 y 21L)



Sostiene hasta 3 bandejas con soporte horizontal (17 y 21L)

