

BRAZO INSTRUCTOR IV – AMBU[®]




Real hasta el más mínimo detalle

El Brazo Instructor IV está preparado para practicar la inserción de cánulas y catéteres, infusión de fluidos, inyección de medicación, muestras de sangre y medición del pulso.

- La piel y las venas sustituibles están hechas de látex natural, lo que facilita el cierre de orificios después de la penetración, aumentando el tiempo de vida del brazo.
- La muñeca desplazable y el brazo giratorio garantizan una práctica absolutamente real, especialmente cuando se coloca un catéter en el dorso de la mano.
- El recipiente de fluidos está incorporado al brazo de prácticas.
- El sistema de válvulas reduce la formación de bolsas de aire en los vasos sanguíneos.
- Kit de transporte multiservicios tanto como alfombra lavable como kit protector.
- El panel indicador representa cada vaso sanguíneo, con una autorregulación inmediata si por ejemplo una infusión es correcta.

Datos Técnicos


- Dimensiones del brazo (L): 68 cm.
- Dimensiones del kit: 75 x 15 x 11 cm.
- Capacidad del recipiente: 260 ml.
- Peso: 3,0 Kg.

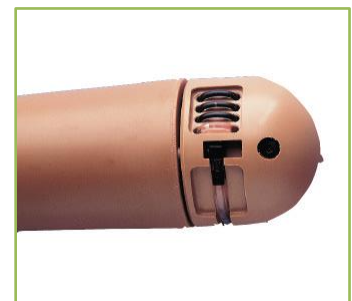

Brazo giratorio

Materiales

- Piel: Latex Natural
- Mano y brazo: PVC duro
- Venas y arterias: Latex Natural
- Indicador: Silicona
- Bolsa: Nylon

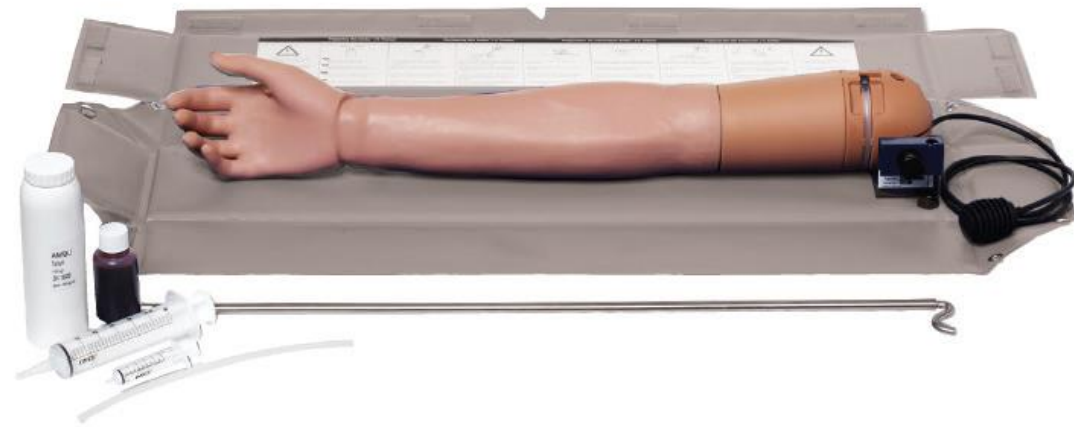


IndusLab[®]