

**ESTUFA INCUBACIÓN CAPACIDAD 32 LT.
MOD. IN-30 – MEMMERT – ALEMANIA**



Características Generales

Estufa de Incubación líder del mercado chileno y mundial de última generación, digital microprocesada. El sistema de calentamiento de este incubador está ajustado de forma óptima para un sistema de convección natural, por este motivo, el fin de calentar cargas muy valiosas con especial cuidado en los sectores farmacéutico, médico, de la investigación y la química de los alimentos.

Controles iluminados PID softouch.

Estructura exterior e interior completamente en Acero Inoxidable. Controla a través de su micro computador múltiples funciones de temperatura AtmoSAFE. Compensa de forma automática los cambios de temperatura después de repetidas aperturas de puertas o del aumento / disminución del contenido interno. Puerta interior magnética de vidrio para inspección sin tener que afectar su contenido. Interior completamente en Acero Inoxidable AISI 304 ASTM brillante. Controlador inteligente de temperatura está conformado de 30 secciones o etapas. Contiene además función de auto diagnóstico, sensor de fallas, alarmas de puerta abierta y fallas. Sistema de descongelamiento automático. Función auto detención del timer, seteo de tiempo, Conexión a PC vía puerto RS-485.

Características Técnicas

Temperatura

- Rango de temperaturas ajustables: +20 a +80 °C
- Rango de temperatura de trabajo: mín. 5 sobre la temperatura ambiente hasta +80 °C
- Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales: 0,1 °C
- Sonda de temperatura: 1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos

Técnica de regulación

- Ajuste de idioma: Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro
- Control COCKPIT: Single DISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución.
- Temporizador: Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días.
- Función Setpoint WAIT: El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal
- Calibración: tres valores de temperatura a elegir.
- Parámetros ajustables: Temperatura (Celsius o Fahrenheit), posición de la trampilla de extracción de aire, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno.

Ventilación

- Ventilación: Ventilación natural.
- Aire exterior: a través de trampilla de extracción de aire de configuración electrónica; adición de aire exterior precalentado.
- Extracción de aire: Tubo de extracción con válvula de estrangulación, regulable electrónicamente.

Comunicación


- Protocolización de datos: Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico.
- Programación: Lectura, administración y organización del registrador de datos a través del puerto Ethernet (versión de prueba por un plazo limitado disponible para descargar). Si se desea, el dispositivo USB con software AtmoCONTROL está disponible a modo de accesorio.

Seguridad

- Vigilancia de la temperatura: Vigilancia de la temperatura electrónica y ajustable y limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880) para interrupción del calentamiento a 20 °C por encima de la temperatura máxima del equipo.
- Sistema de autodiagnóstico: para detección de fallos.

Equipamiento básico

- Puerta: Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión).
- Inserciones: 1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s).
- Envío estándar: incluye certificado de calibración de fábrica a +37 °C
- Puerta: Puerta interior de cristal.

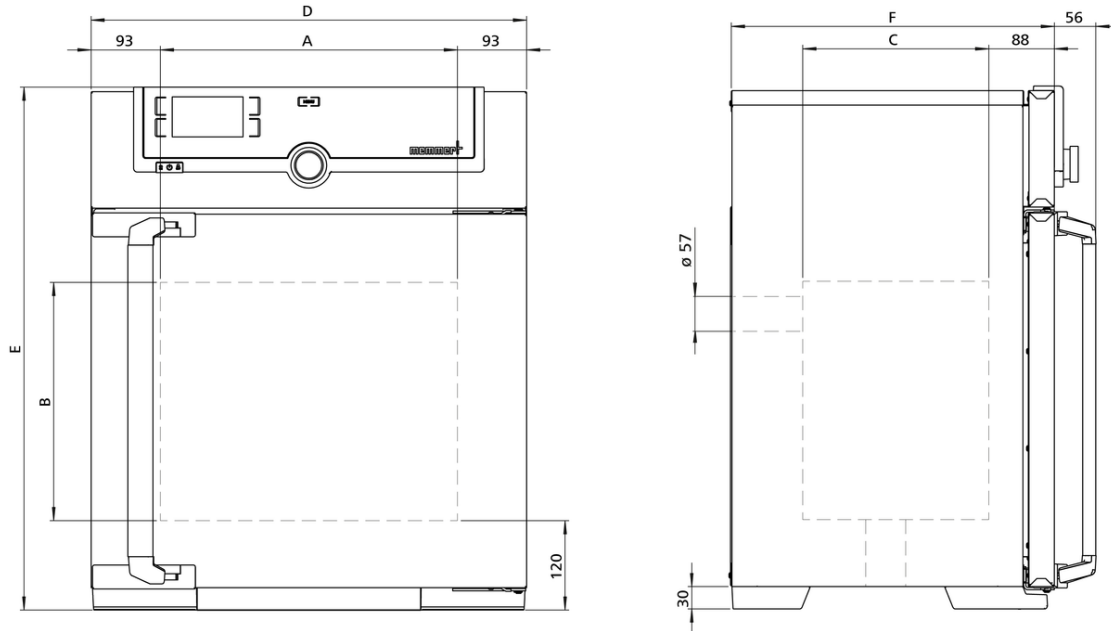

Interior de acero inoxidable

- Interior: Mantenimiento sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada. Acero Inoxidable AISI 304 espejo.
- Volumen: 32L
- Medidas interiores: An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 320 x 250 mm
- N° máx. de inserciones: 3
- Máx. carga de la cámara del equipo: 60kg
- Carga máx. por inserción: 20kg



Carcasa de acero estructural

- Medidas exteriores: An(D) x Al(E) x F(F): 585 x 704 x 434 mm (F +56mm manilla de la puerta)
- Carcasa: Pared trasera con chapa de acero galvanizada

Datos eléctricos

- Voltaje consumo eléctrico: 220V/50 Hz/ aprox. 1600 W

Condiciones ambientales

- Instalación: La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm.
- Altura de instalación: Máx. 2000 m sobre el nivel del mar
- Temperatura ambiente: +5 °C a +40 °C
- Humedad del aire (rh): Máx. 80%, sin condensación
- Categoría de sobretensión: II
- Grado de contaminación: 2

Datos de Embalaje/Envío

- Información de transporte: ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical!
- Medidas aprox. incl. carton: An x Al x F 660 x 890 x 650 mm
- Peso neto: aprox. 48 kg
- Peso bruto carton: aprox. 64 kg

- Estabilidad: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Controlador: LCD de alta resolución

Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras

